





Cómo usar su inhalador Respimat®

Pasos importantes para preparar su inhalador

Hay cosas que debe hacer para asegurarse de que el inhalador Respimat® esté listo para usar.

También las deberá hacer cada vez que obtenga un resurtido de su receta médica.

1. Saque todas las partes del inhalador del paquete.
2. Mantenga cerrada la tapa de color en la pieza de plástico.
3. Presione el seguro mientras saca la base transparente con la otra mano. (Tenga cuidado de no tocar la parte que perforará el cartucho).
4. Inserte el extremo angosto del cartucho en el inhalador.
5. Coloque el inhalador en una superficie firme con el extremo del cartucho hacia abajo y presione firmemente sobre la tapa de color hasta que encaje.
6. Vuelva a poner la base transparente. Asegúrese de escuchar un “clic”.
7. No quite la base transparente ni el cartucho después de haberlos unido.
8. Mantenga la tapa cerrada. Gire la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que escuche el “clic”.
9. Abra la tapa hasta que se abra por completo.
10. Apunte la boquilla hacia abajo.
11. Presione el botón para liberar la dosis.
12. Si no ve el rocío, repita los pasos del 8 al 12 hasta que este se vea.
13. Después de ver el rocío, repita 3 veces más los pasos del 8 al 12.
14. Cierre la tapa. Su inhalador está listo para usar.

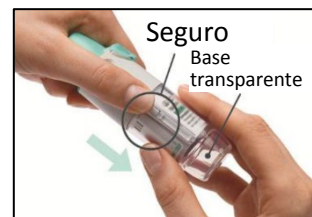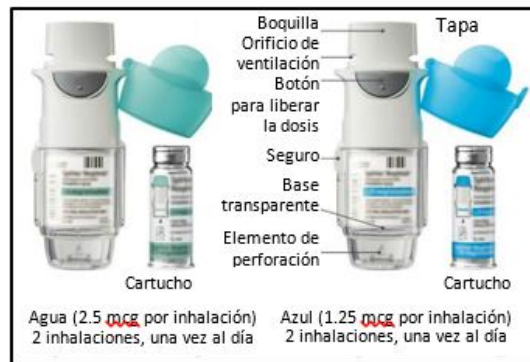

Este documento es solo para darle información. Hable con su doctor acerca del tratamiento adecuado para usted. Imágenes de Boehringer Ingelheim International GmbH.

Cómo usar su inhalador Respimat®

Siga estos pasos para usar su inhalador Respimat® de manera correcta

1. Mantenga la tapa cerrada.
2. Gire la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que escuche un “clic”.
3. Abra la tapa hasta que se abra por completo.
4. Aleje la cabeza del inhalador y exhale de modo normal.
5. Coloque la boquilla dentro de la boca, detrás de los dientes, y cierre los labios alrededor de la boquilla.
6. **No** cubra los orificios de ventilación de la boquilla con los labios.
7. Apunte el inhalador hacia la parte de atrás de la garganta.
8. Inhale lenta y profundamente por la boca y, **al mismo tiempo**, presione el botón para liberar la dosis, y siga inhalando.
9. Mantenga la respiración durante 10 segundos.
10. Repita los pasos del 2 al 9 para un total de 2 inhalaciones.
11. Cierre la tapa hasta que vuelva a usar su inhalador.




Instrucciones de limpieza

1. Use un pañuelo o paño limpio y húmedo para limpiar la boquilla.
2. Use un pañuelo o paño limpio y húmedo para limpiar el interior de la parte de metal dentro de la boquilla.
3. Limpie su inhalador una vez por semana.

No Se quede Sin Medicación

- Vigile la cantidad de dosis que quedan en su inhalarlo.
- **Cuando haya usado aproximadamente la mitad de las dosis, llame para resurtir.**
- Cuando el indicador de dosis llega al área roja de la escala, solo queda medicamento para 7 días.
- Cuando el indicador de dosis llega al final de la escala roja, su Respimat® está vacío y se bloqueará.

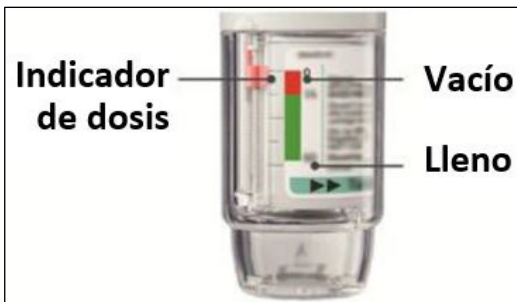

**Si tiene preguntas o desea obtener recursos,
llame al 1 (833) 327-8462. www.SouthSideKidsAsthma.org**

Este documento es solo para darle información. Hable con su doctor acerca del tratamiento adecuado para usted. Imágenes de Boehringer Ingelheim International GmbH.